

TR

NOVA-TRAY®

Ürün Açıklaması

Nova-Tray şeffaf, ışıkla sertleşen tek bir ölçü tablası reçinesidir. Karıştırılmadan direkt olarak kullanılabilir ve hoş olmayan bir kokusu olmaması nedeniyle, kimyasal sertleştirici tepsi reçinesinden daha kolay ve elverişlidir.

İçerik

- Üretan dimetakrilat (UDMA)
- Cam
- Foto-başlatıcılar
- Pigment

Endikasyonlar

1. Taç, köprü ve toplam protez tekniğinde kullanım için bireysel tepsi.
2. Isırık desenleri ve odontogramlar için taban plakaları

Uygulama

1. Tek bir tepsi için alçı modelindeki kenar boşluklarını işaretleyin. Gerekirse balmumu levhası gibi bir boşluk koruyucu kullanın
2. **Nova-Tray**'i alçı modeline takın.
3. Sınır çizgileri boyunca fazla malzemeleri kesin. Çıkarılmış malzemeler bir tutma kolu için kullanılabilir.
4. Alçı modelini tepsi reçinesine bir UV ışıkla sertleştirme ünitesine koyun ve 3 ila 5 dakika boyunca polimerize edin. Daha sonra, tepsi reçinesini jips modelinden çıkarın, ters çevirin ve ters tarafı ışığa maruz bırakın. Uzun süre ışığa maruz kalmak malzemenin fiziksel özelliklerini iyileştirebilir.
5. Pürüzlü yüzeyleri taş veya frezelerle düzeltin ve ihtiyaç duyduğunuz kadar tepsiyi bir delik delin.

6. Alkol ya da aseton içine batırılmış bir doku ile çıkarılabilen havanın oksijeninin varlığından kaynaklanan herhangi bir tortu balmumu ve tepsi reçinesinin yüzeyinde oluşan hafif bir inhibisyon tabakasını çıkarın


Depolama

1. Kuru ve serin yerde muhafaza ediniz.
2. Yüksek sıcaklıkta veya yoğun ışıkta saklamayın.
3. Kullandıktan sonra kapağı tekrar yerine takın.

Dikkat Edilecek Hususlar

1. Sadece dental kullanım içindir.
2. Bir diş hekimi ve diş teknisyenleri tarafından kullanılmalıdır. Prosedürü ve önlemleri izleyin.
3. Çocuklar, yaşlılar ve diğerleri dahil olmak üzere dişhekimi olmayan kullanıcıların erişiminden uzak tutun.
4. **Nova-Tray**'i, akrilat karşı iltihap veya alerjisi olan bir hastaya kullanmayın.
5. Önlenmemiş reçineye maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. **Nova-Tray**'i kullanarak koruyucu eldivenleri takın.
6. Temas cildinde, sabun ve su ile yıkayınız.
7. Gözlerle yanlışlıkla temas veya oral dokularla uzun süreli temas olursa, derhal bol miktarda su ile yıkayın.
8. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Semboller

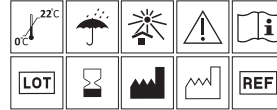

 **PRESIDENT DENTAL GmbH**

Kesselbodenstrasse 5, 85391 Allershausen, Germany
Tel: +49 8166 389 9 820 • Fax: +49 8166 389 9 821
www.presidentdental.com • info@presidentdental.com