




Bu ürünün tasarımında ve üretiminde Avrupa Birliği 93/42/EEC yönetmelikleri uygulanmıştır.

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyup uygulayınız.

Teknik Özellikler

Model	FX 204 M4	FX 204m M4	FX 204m B2	FX 204m B2	FX 205 M4	FX 205m M4	FX 205 B2	FX 205m B2
Hortum Bağlantı Tipi	ISO 9168 Type 2 (4 girişli)		ISO 9168 Type 2 (2 girişli)		ISO 9168 Type 2 (4 girişli)		ISO 9168 Type 2 (2 girişli)	
Başlık Bağlantı Tipi	E type ISO 3964							
Max. Hız	25.000 dk ⁻¹							
Tork	2.ON - cm							
Hava Basıncı	0.20 - 0.25 Mpa (2.0 - 2.5 kgf/cm2)							
Hava Tüketimi	50 mL/dk ve fazlası (0.25MPa)							
Su Basıncı	—				0.10 - 0.25 Mpa (2.0 - 2.5 kgf/cm2)			
Çift Hava Basıncı	0.15 - 0.25 Mpa (1.5 - 2.5 kgf/cm2)	—			0.15 - 0.25 Mpa (1.5 - 2.5 kgf/cm2)	—		
Soğutma Su Miktarı	—				50 mL/dk ve fazlası (0.25MPa)			
Soğutma Hava Miktarı								
Soğutma Sprey Çeşidi	Susuz				Dıştan Soğutma			
Kullanım Şartları	Derece: 0-40C (No), Nem 35-75% Atmosfer Basıncı 700-1,0,60 hPa							
İthalat ve Saklama Koşulları	Derece: 10-50C (No), Nem 10-85% Atmosfer Basıncı 500-1,0,60 hPa							
Termedezenfeksiyon	-	○	-	○	-	○	-	○

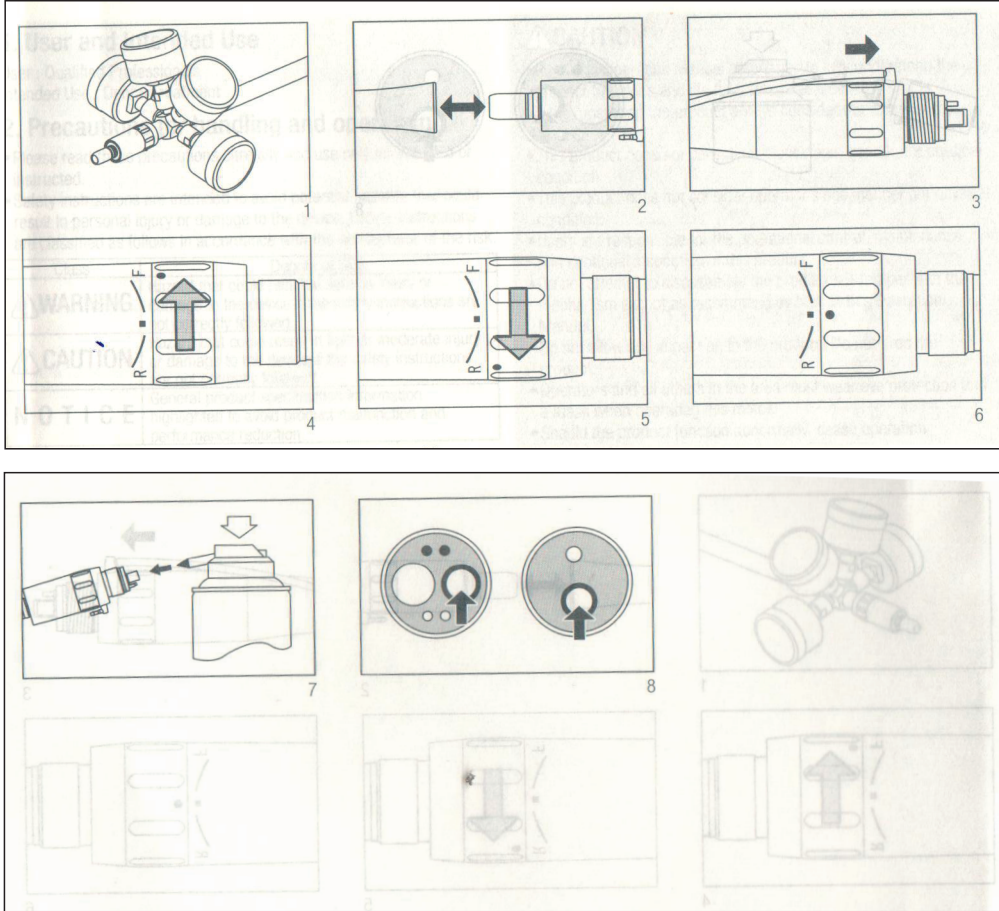


Figür Tanımı

- (1) Hava Basıncı Ölçümü Fig 1
- (2) Motor Anguldurva Bağlantısı Fig 2
- (3) Sprey Nozıl Bağlantısı Fig 3
- (4) İleri Rotasyon : İLERİ/GERİ Değiştirme halkasını Fig.4 te görüldüğü gibi “F” tarafına döndürün.
- (5) Geri Rotasyon : İLERİ/GERİ Değiştirme halkasını Fig.5 te görüldüğü gibi “R” tarafına döndürün.
- (6) İLERİ/GERİ Değiştirme halkası “F” ve “R” halkasının ortasında iken hava kesilir ve motor dönmez. (Fig.6)
- (7) Yağlama Bakım (Fig.7)
- (8) Hortum Bağlantı Tipi (Fig.8)

Su ve Chip Havası Girişi

Ataçmana su, chip hava veya sprej girişi gerektiği zaman, sprej nozzel ataçmanını motorun sprej hortum çıkışına takın. Hortumu istenilen boyda kesin. Piyasemen başlıklar için sprej nozzel opsiyoneldir.

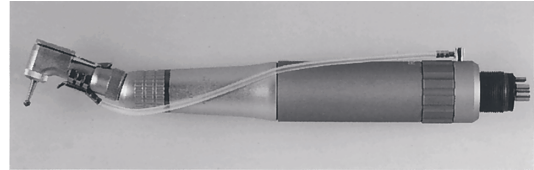

NAKANISHI INC.
www.nsk-inc.com
700 Shimohinata Kanuma-shi
Tochigi 322-8666,
Japan

NSK Europe GmbH
www.nsk-europe.de
Elly-Beinhorn-Strasse 8
65760 Eschborn,
Germany

NSK France SAS
www.nsk.fr
32 rue de Lisbonne
75008 Paris,
France

NSK Dental Spain SA
www.nsk-spain.es
C/ Mòdena,43 El Soho-Európolis
28232 Las Rozas, Madrid,
Spain

NSK United Kingdom Ltd
www.nsk-uk.com
Office 5, Gateway1000,
Arlington Business Park, Whittle Way,
Stevenage, SG1 2FP, UK

NSK America Corp
www.nskdental.com
1800 Global Parkway
Hoffman Estates, IL 60192,
USA

NSK Oceania Pty Ltd
www.nskoceania.com.au
Unit 22, 198-222 Young St.
Waterloo, Sydney,
NSW 2017, Australia

NSK Middle East
www.nsk-inc.com
Room 6EA-701, 7th Floor, East Wing No.6
Dubai Airport Free Zone,
PO Box 54316 Dubai, UAE

NSK Asia Pte Ltd
www.nsk-inc.com
1 Maritime Square,
#09-33 HarbourFront Centre,
Singapore 099253

Specifications are subject to change without notice.

2013.02.20 05 ©

